


MP

Manual de Instrucțiuni

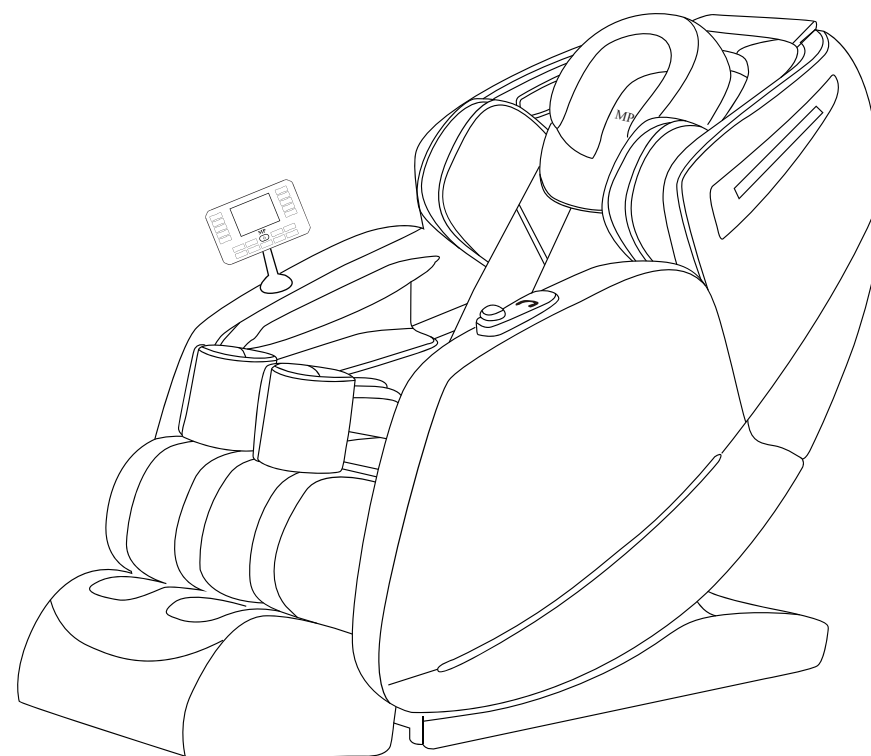

MP-A062

CONȚINUT

Vă rugăm să citiți și să urmați toate instrucțiunile de siguranță și de operare enumerate în acest manual înainte de utilizare.

Trebuie întotdeauna să se ia măsuri de precauție de bază în timpul funcționării.

Pregătire și instrucțiuni înainte de utilizare	2
Structura produsului	3
Instrucțiuni pentru controler	4
Instrucțiuni de operare	5-6
Manualul comenzilor rapide	7
Instrucțiuni pentru utilizarea Bluetooth	7
Înainte de utilizare	8
Precauții de siguranță	9-10
Întreținerea produsului	11
Specificații tehnice ale produsului	12
Ghid de întreținere a pielii scaunului de masaj	13-14

3. Optimizarea obiceiurilor de utilizare

Utilizați scaunul de masaj uniform

- Presiunea prelungită într-un singur punct poate provoca deformarea locală a pielii. Ajustați periodic poziția de ședere sau utilizați o pernă pentru a distribui presiunea.
- Evitați supraîncărcarea scaunului (depășirea limitei de greutate a produsului) pentru a preveni uzura accelerată.

Inspectare și întreținere regulată

- Verificați cusăturile, marginile și alte zone cu uzură ridicată. Dacă observați fisuri mici sau descuamare, utilizați imediat adeziv de reparare a pielii pentru a preveni deteriorarea ulterioară.
- Dacă scaunul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, se recomandă acoperirea acestuia cu o husă respirabilă anti-praf pentru a preveni acumularea de praf.

4. Soluții pentru probleme comune

- Zgârieturi minore: Aplicați ușor cremă de reparare a pielii cu un bețișor de bumbac, apoi lustruiți după uscare.
- Suprafață lipicioasă: Aceasta poate fi cauzată de excesul de produs de îngrijire. Ștergeți cu un detergent neutru diluat și lăsați să se usuce complet.
- Miros neplăcut: Presărați bicarbonat de sodiu pe suprafață, lăsați să acționeze câteva ore, apoi aspirați pentru a elimina mirosurile.

5. Observații

- Evitați utilizarea benzii adezive, a benzii dublu adezive sau a adezivilor decorativi, deoarece îndepărtarea acestora poate deteriora stratul de piele.
- Dacă pielea este grav deteriorată sau crăpată pe o suprafață extinsă, contactați serviciul clienți pentru înlocuirea husei din piele.

Prin urmare, respectând aceste recomandări, puteți prelungi durata de viață a pielii, menținând atractivitatea și confortul scaunului de masaj. Secretul întreținerii zilnice este prevenirea timpurie a problemelor, remediarea promptă a daunelor minore și evitarea acumulării acestora în deteriorări majore.

Ghid de Întreținere a Pielii pentru Scaun de Masaj

Întreținerea corespunzătoare a pielii unui scaun de masaj poate prelungi semnificativ durata sa de viață, păstrând aspectul plăcut și confortul optim. Iată câteva sfaturi practice de îngrijire:

1. Curățare și Întreținere Zilnică

Ștergerea Regulată

- Utilizați o cârpă moale și uscată sau ușor umedă (înmuiată în apă sau într-un detergent neutru diluat) pentru a șterge suprafața pielii, eliminând praful, petele de transpirație și murdăria.
- Evitați produsele de curățare care conțin alcool, componenți alcalini sau acizi (precum apa săpunului sau înălbitorul), deoarece pot accelera procesul de îmbătrânire a pielii.
- Notă: După ștergere, uscați imediat cu o cârpă curată pentru a preveni acumularea de umiditate, care ar putea duce la apariția mucegaiului sau a descumărilor.

Eliminarea Petelor Rezistente

- Pete pe bază de ulei (grăsimi, cosmetice): Ștergeți ușor cu o cantitate mică de alcool (sub 75% concentrație), apoi curățați cu o cârpă umedă.
- Pete pe bază de apă (băuturi, sucuri): Ștergeți imediat cu o cârpă umedă pentru a preveni pătrunderea.
- Nu folosiți obiecte ascuțite sau cârpe abrazive, deoarece pot deteriora stratul protector al pielii.

Îngrijire Periodică

- La fiecare 1-2 luni, aplicați un produs de îngrijire dedicat pentru piele PU (sau un ulei de silicon) uniform pe suprafață, pentru a menține flexibilitatea și strălucirea și a preveni crăparea.
- Evitați uleiurile pentru piele naturală (precum uleiul de nură), deoarece pot face pielea lipicioasă sau pot provoca decolorări.

2. Măsuri de Protecție

Evitați Expunerea Directă la Soare și Temperaturi Înalte

- Expunerea prelungită la razele UV poate provoca decolorarea, înțepenirea și crăparea pielii. Plasați scaunul de masaj într-un loc umbrat sau folosiți perdele pentru a bloca lumina soarelui.
- Păstrați scaunul departe de surse de căldură (radiatoare, încălzitoare electrice), deoarece temperaturile ridicate accelerează îmbătrânirea materialului.

Controlul Umidității


- Mediile umede pot favoriza apariția mucegaiului sau a descumărilor. Mențineți camera bine ventilată și uscată; utilizați un umidificator în condiții de umiditate ridicată.
- Dacă pielea se umezește, absorbiți imediat excesul de umiditate cu o cârpă uscată și lăsați-o să se usuce natural. Nu expuneți la soare direct sau folosiți uscătorul de păr.

Minimizați Frecarea și Contactul cu Obiecte Ascuțite

- Evitați purtarea hainelor cu accesorii dure (ținte, fermoare) pe scaun pentru a preveni zgârieturi.
- Dacă animalele de companie intră în contact cu scaunul, asigurați-vă că ghearele sunt tăiate sau puneți o pătură subțire pentru protecție.

01 Pregătire și Instrucțiuni înainte de Utilizare

1.Deschideți cutia de ambalaj și scoateți accesoriile


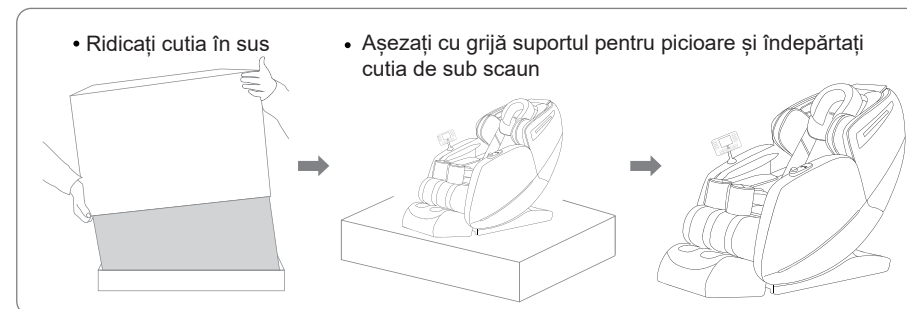


1.Îndepărtați banda de ambalaj de pe cutia exterioră a scaunului de masaj, ridicați cutia exterioră în sus și scoateți-o.


2.Scoateți accesoriile și puneți-le deoparte pentru utilizare ulterioară.

2. Plasarea Scaunului de Masaj



- * Ridicați întregul scaun de masaj din cutia de bază și amplasați-l într-o locație adecvată în casă.
- * Evitați să-l plasați în lumină directă a soarelui sau în apropierea aparatelor de încălzire, deoarece acest lucru poate provoca decolorarea sau înțepenirea tapiteriei.
- * Pentru a preveni deteriorarea pardoselii și a reduce zgomotul, puneți material textil sau alte materiale sub scaunul de masaj.
- * Asigurați-vă că nu există obstacole în fața sau în spatele scaunului de masaj (lăsați un spațiu liber de cel puțin 30 cm în spatele spătarului).
- * Evitați să-l plasați în zone umede sau pe suprafețe inegale.
- * Pentru a preveni interferențele semnalului, păstrați scaunul de masaj la o distanță de cel puțin 1 metru față de televizoare, radiouri și alte dispozitive.

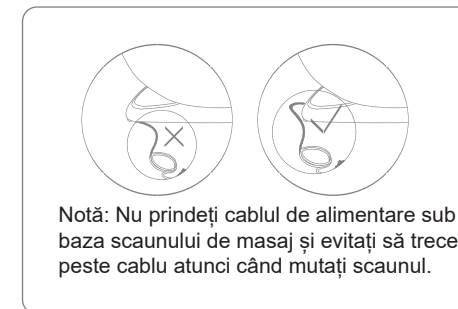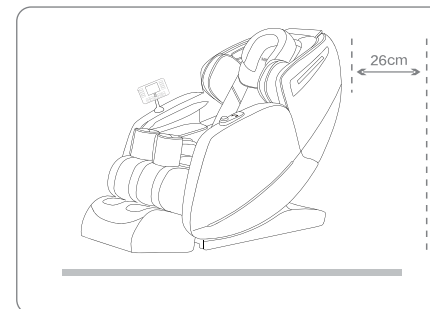

02 Product Structure

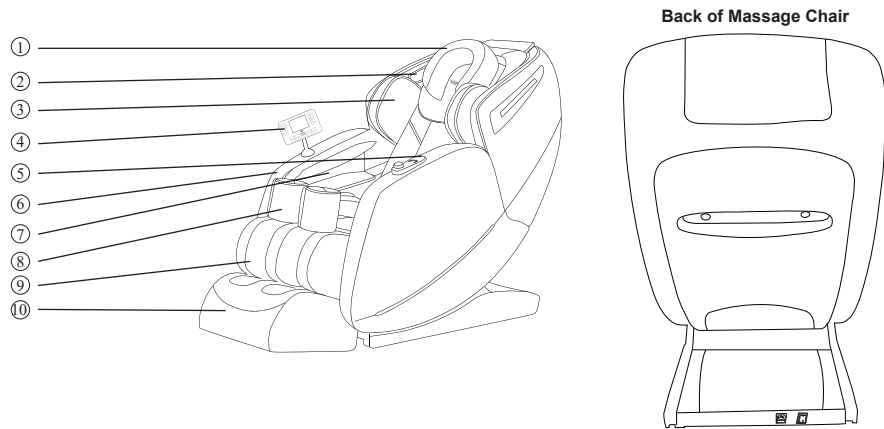

- 1. Pernă
- 2. Capac difuzor
- 3. Airbaguri pentru umeri
- 4. Telecomandă
- 5. Comandă rapidă
- 6. Braț
- 7. Airbaguri pentru brațe
- 8. centură pentru coapsă
- 9. Airbaguri pentru picioare
- 10. Role pentru picioare
- 11. Siguranță
- 12. Conector de alimentare
- 13. Pornire/Oprire

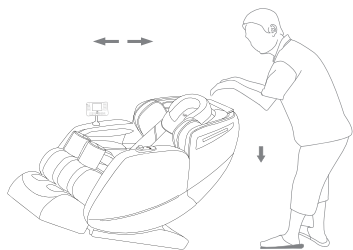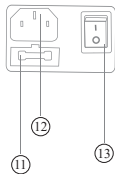

Cum să mutați scaunul de masaj

1. Țineți spătarul cu ambele mâini, așa cum se arată în imaginea din stânga, și înclinați scaunul înapoi la aproximativ 30 de grade.
2. Împingeți cu grijă scaunul de masaj înainte sau înapoi folosind roțile până când ajunge în poziția dorită, apoi eliberați.



Avertisment

- *Nu mutați scaunul de masaj în timp ce este folosit.
- *La mutarea scaunului de masaj, acesta poate deteriora podeaua. Se recomandă plasarea unei protecții sub scaun.
- *Pentru a preveni căderile, asigurați-vă că țineți ferm scaunul de masaj în timpul mutării.
- *Când mutați scaunul de masaj, asigurați-vă că suportul pentru picioare este complet retras pentru a preveni accidentări.


10 Specificații Tehnice ale Produsului

Denumire Articol	Descrierea Specificațiilor
Denumire Produs	Scaun de Masaj
Model	MP-A062
Tensiune Nominală	110V-240V
Frecvență Nominală	50-60Hz
Putere Nominală	120W
Greutate	Greutate netă: 55kg Greutate brută: 65kg

Compania noastră își rezervă dreptul de a îmbunătăți produsul și manualul acestuia fără notificare prealabilă. Aspectul produsului este conform produsului real.

Acest manual a fost verificat cu atenție, dar nu putem exclude posibilitatea unor erori de tipar sau neînțelegeri ale conținutului. Ne cerem scuze pentru orice inconveniență creată.

09 Întreținerea Produsului

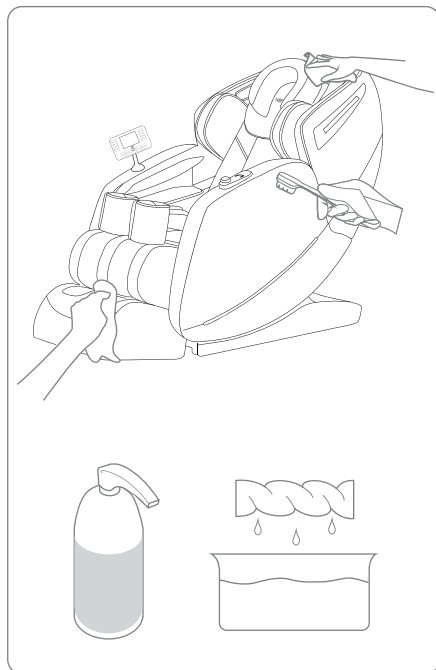


Curățare

1. Nu utilizați sârmă de oțel, produse abrazive sau lichide corozive (precum benzină sau acetonă) pentru curățarea produsului.
2. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
3. Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța scaunul de masaj, telecomanda și cablul de alimentare.
4. Nu folosiți cârpe ude sau agenți de curățare.

Depozitare


1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
3. Nu plasați obiecte grele pe acest produs.

Dacă husa este deteriorată sau apar defecțiuni mecanice, încetați utilizarea produsului și consultați un tehnician specializat.

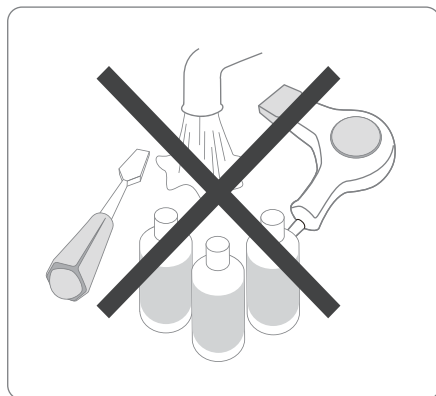

03 Instrucțiuni pentru Controler

Zone funcționale ale controlerului: (Partea frontală a controlerului)

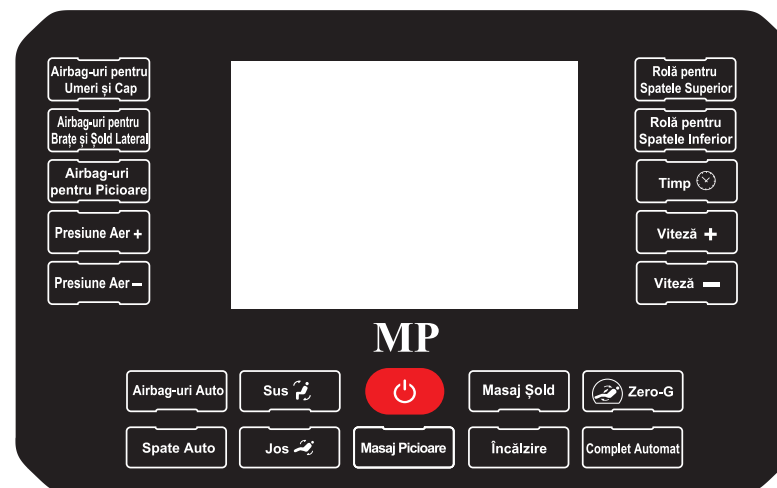

04 Instrucțiuni de Utilizare

Descrierea Funcțiilor Butoanelor

1. Pornire/Oprire: În modul standby, apăsați această tastă pentru a aprinde ecranul controlerului. În acest moment, puteți selecta programul de masaj dorit.
2. Airbaguri Umeri/Cap: Activează/dezactivează funcția de masaj cu airbaguri pentru umeri și cap.
3. Airbaguri Brațe/Șolduri Laterale: Activează/dezactivează funcția de masaj cu airbaguri pentru brațe și șolduri laterale.
4. Airbaguri Picioare: Activează/dezactivează funcția de masaj cu airbaguri pentru picioare.
5. Presiune Airbaguri +: Crește intensitatea airbagurilor (3 niveluri disponibile).
6. Presiune Airbaguri -: Reduce intensitatea airbagurilor (3 niveluri disponibile).
7. Airbaguri Auto: Activează/dezactivează toate funcțiile de masaj cu airbaguri.
8. Masaj Spate Auto: Activează/dezactivează modul automat pentru spate (activează simultan funcțiile de frământare și Tuina).
9. Sus: Țineți apăsat pentru a ridica spătarul și a coborî suportul pentru gambe. Eliberați butonul pentru a opri.
10. Jos: Țineți apăsat pentru a coborî spătarul și a ridica suportul pentru gambe. Eliberați butonul pentru a opri.
11. Masaj Picioare: Activează/dezactivează rolele pentru picioare (3 niveluri de intensitate).
12. Masaj Șolduri: Activează/dezactivează masajul pentru șolduri.
13. Încălzire: Activează/dezactivează încălzirea pentru spate și picioare.
14. Zero-G: Activează funcția de gravitație zero cu unghiul maxim. Această funcție aduce scaunul într-o poziție orizontală.
15. Programe Auto: Relaxare /Bucurie /Întindere /Puternic /Somn /Revigorare.



Avertisment

- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau de cei fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați sau ghidați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor în legătură cu utilizarea acestui produs.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu acest fotoliu de masaj.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau componente obținute de la producător sau departamentul de service.
- Nu utilizați acest aparat cu o tensiune care nu corespunde standardelor specificate pentru acest dispozitiv.
- Acest produs trebuie utilizat cu o priză de alimentare cu împământare cu trei contacte și trebuie să aibă un dispozitiv de împământare fiabil.
- Husă, fie din piele sau textile, trebuie înlocuită imediat dacă este deteriorată. Nu utilizați aparatul pentru a evita accidente.
- Nu lăsați telecomanda să se ude sau să fie expusă la umiditate pentru a preveni defecțiuni.

Condiții Anormale și Metode de Rezolvare

Situații posibile	Metode de rezolvare
Zgomot în timpul funcționării.	The noise produced is due to the structural design and does not affect the machine.
Scaunul de masaj nu funcționează chiar dacă este conectat.	• Verificați dacă fișa de alimentare este introdusă corect • Verificați dacă există alimentare cu energie electrică • Verificați dacă întrerupătorul scaunului de masaj este în poziția "I" • Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat • Verificați dacă siguranța este arsă și înlocuiți-o dacă este necesar
Spătarul nu poate fi reglat liber.	• Verificați dacă există obiecte străine blocate în spătar sau în suportul pentru picioare • Verificați dacă cablul de conectare este slăbit
În timpul utilizării, controlerul funcționează dar scaunul de masaj nu răspunde.	Dacă temperatura scaunului de masaj devine prea ridicată după o funcționare prelungită, acesta va intra automat în starea de protecție termică. Vă rugăm să opriți alimentarea și să încetați utilizarea timp de 30 până la 50 de minute pentru a permite aparatului să se răcească intern.
În timpul utilizării, controlerul nu funcționează și scaunul de masaj se oprește.	Dacă funcția de timer automat este activată și timpul setat a expirat, vă rugăm să apăsați din nou butonul pentru a opera.

Dacă apare o situație anormală, pentru a preveni accidentele, vă rugăm să încetați utilizarea scaunului de masaj și să deconectați cablul de alimentare. Dacă metodele de rezolvare menționate mai sus sunt în continuare ineficiente, vă rugăm să contactați centrul de service.

08 Măsuri de Siguranță



Avertisment

Înainte de utilizare, citiți cu atenție toate instrucțiunile.

Acest scaun de masaj trebuie utilizat cu o priză care se potrivește cu ștecherul. Împământarea necorespunzătoare poate provoca electrocutare. Nu modificați ștecherul sau priza pe cont propriu; acestea trebuie verificate întotdeauna de un tehnician calificat. Atunci când utilizați produse electrice, respectați măsurile de siguranță de bază pentru a preveni riscuri precum electrocutarea, arsuri, incendii sau vătămări corporale, inclusiv cele menționate mai jos.

Utilizați doar cu o priză care se potrivește cu ștecherul.

- Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet în priză pentru a reduce riscul de scurtcircuit.
- Deconectați scaunul de masaj imediat după utilizare sau înainte de curățare.
- Nu utilizați acest produs la temperaturi ridicate.
- Nu depozitați și nu utilizați acest produs în aer liber sau sub lumina directă a soarelui.
- În cazul unei întreruperi bruște a alimentării cu energie în timpul utilizării, opriți imediat și deconectați dispozitivul pentru a preveni deteriorarea la restabilirea alimentării.
- Nu folosiți scaunul de masaj dacă cablul de alimentare este ud sau deteriorat.
- Nu introduceți și nu scoateți ștecherul cu mâinile ude pentru a evita accidentele.
- Supravegheați copiii, persoanele cu dizabilități sau pe cei cu mobilitate redusă atunci când se află în apropierea scaunului de masaj sau îl utilizează.
- Utilizați produsul doar în scopurile descrise în acest manual.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt furnizate de companie.
- Nu stați în picioare, nu vă așezați și nu săriți pe suportul pentru picioare pentru a preveni accidentările.
- Nu încercați să vă așezați pe cotiere sau pe spătar, deoarece scaunul se poate răsturna și poate provoca accidente.
- Nu adormiți în timpul masajului.
- Curățați regulat scaunul de masaj și evitați introducerea oricăror obiecte în fantele acestuia.
- Nu mutați scaunul de masaj trăgând de cablul de alimentare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă există fisuri anormale sau deteriorări în tapițeria sau spătarul scaunului. Nu utilizați produsul dacă observați anomalii și contactați imediat centrul de service post-vânzare al furnizorului.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice.
- Consultați un medic dacă nu sunteți sigur(ă) dacă puteți folosi scaunul de masaj.
- Consultați un medic înainte de a folosi produsul dacă aveți: tumori maligne, boli de inimă, sunteți însărcinată, în perioada postpartum sau menstruației, aveți nevoie de convalescență în liniște, urmați un tratament medical, aveți probleme de spate, vertebre cervicale anormale sau deformări.
- Opriți imediat utilizarea dacă resimțiți durere în timpul masajului și solicitați asistență medicală dacă apar leziuni.
- Nu masați pielea inflamată sau umflată.
- Acest produs oferă un masaj confortabil pentru uz casnic și nu înlocuiește terapia de masaj profesională.
- Se recomandă utilizarea scaunului de masaj timp de maximum 30 de minute pe zi, cu cel mult 20 de minute per zonă, pentru a evita efectele adverse ale utilizării excesive și pentru a preveni supraîncălzirea, ceea ce poate reduce durata de viață a produsului.
- Nu utilizați acest produs în medii cu aerosoli sau în apropierea surselor de oxigen.
- Nu este recomandat copiilor sub 12 ani.

16. Role pentru partea superioară a spatelui:

Apăsați o dată pentru a începe masajul în direcția acelor de ceasornic, afișajul arătând A1.

După activarea masajului, apăsați de două ori pentru rotație în sens antiorar, afișajul arătând A2.

După activarea masajului, apăsați de trei ori pentru alternarea rotației orare și antiorare, afișajul arătând A3.

După activarea masajului, apăsați de patru ori pentru a afișa A0 pe ecran, dezactivând toate funcțiile de masaj pentru umeri și partea superioară a spatelui.

17. Role pentru partea inferioară a spatelui:

Apăsați o dată pentru a începe masajul în direcția acelor de ceasornic, afișajul arătând B1.

După activarea masajului, apăsați de două ori pentru rotație în sens antiorar, afișajul arătând B2.

După activarea masajului, apăsați de trei ori pentru alternarea rotației orare și antiorare, afișajul arătând B3.

După activarea masajului, apăsați de patru ori pentru a afișa B0 pe ecran, dezactivând toate funcțiile de masaj pentru partea inferioară a spatelui.

18. Temporizare:

Apăsați butonul de pornire pentru a seta timpul la: 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20 minute, 25 minute, 30 minute, urmat de oprirea automată a ciclului de funcționare.


19. Viteză+:

Apăsați butonul pentru a crește viteza rolurilor de masaj, având 3 niveluri în total.

20. Viteză-:

Apăsați butonul pentru a reduce viteza rolurilor de masaj, având 3 niveluri în total.

05 Manualul Tastelor de Comandă Rapidă

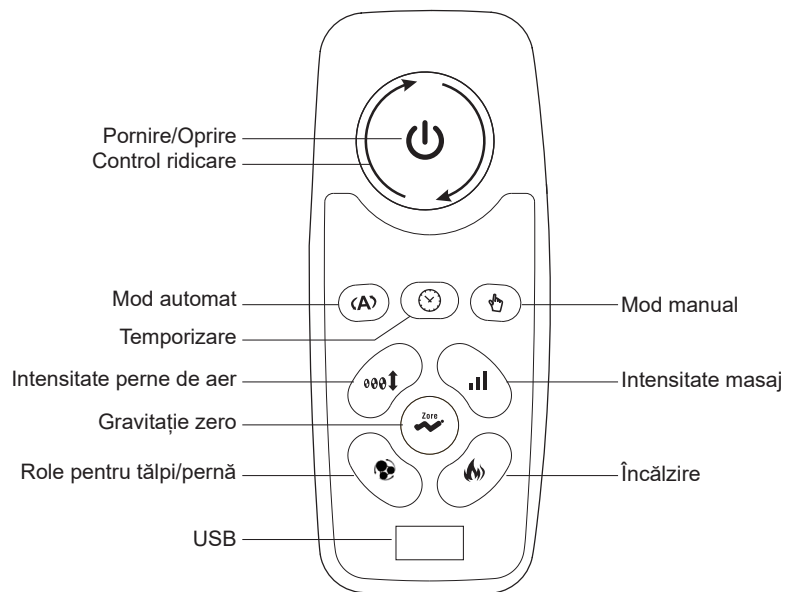

06 Instrucțiuni de Utilizare a Funcției Bluetooth


1. Funcția Bluetooth este activată în mod implicit atunci când dispozitivul este pornit, având denumirea Bluetooth: MP Fotoliu masaj.
2. Activați Bluetooth pe telefonul dvs., căutați și conectați-vă la dispozitivul corespunzător pentru a reda muzică.

07 Înainte de utilizare



Avertisment

- Când ajustați componenta de masaj pentru picioare în sus, nu stați pe scaunul de masaj, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul și poate provoca răsturnarea scaunului, ducând la accidente și răni.
- Înainte de a vă așeza pe scaunul de masaj, asigurați-vă că spătarul este în poziție verticală. După ce v-ați așezat, reglați unghiul de înclinare în funcție de preferințele personale.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în spațiile dintre șezut și spătar sau între șezut și componenta de masaj pentru picioare pentru a preveni accidentele și răni.
- Când ajustați unghiul, asigurați-vă că nu există obstacole sau animale mici în spatele spătarului, sub scaun sau în fața componentei de masaj pentru picioare.

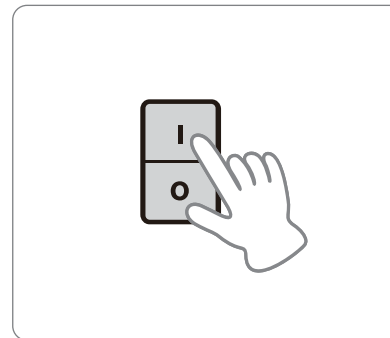

Comutatorul se află pe capacul din spate al cutiei de control electronic.

Conectarea cablului de alimentare al scaunului de masaj

- Conectați cablul de alimentare.
- Porniți comutatorul de alimentare, situat pe partea dreaptă a scaunului de masaj.
- Dacă scaunul de masaj nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că comutatorul de alimentare este setat în poziția "O" pentru a-i prelungi durata de viață.
- Deconectați ștecherul de alimentare.
- Nu răsușiți și nu îndoiți cablul de alimentare pentru a preveni deteriorarea acestuia.